



STOMOCUR®

Produktkatalog

EXPERTS EDITION

2022

Vorwort

FORLIFE steht bereits seit über 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, die dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards – Made in Germany – ermöglichen.

Die Entscheidung ausschließlich in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren ist dabei genauso mit der Unternehmensphilosophie verbunden wie die, auf die Erfahrung langjähriger Mitarbeiter zu setzen. Es freut uns ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Mitarbeiter, die bereits seit Beginn an für FORLIFE arbeiten, mit jüngeren Nachwuchskräften in einem Team zu vereinen und somit bewährte Technologien mit zukunftsgerichteter Technik zu verbinden.

Der Fortschritt ist ein elementarer Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgs. Daher bauen wir neben der Erfahrung unserer Mitarbeiter auch auf hochmoderne Produktionsautomaten. Der Einsatz neuester Computertechnologie und die Nutzung effizienter Produktionsmethoden sichert langfristig die wirtschaftliche Produktion hochqualitativer und innovativer Produkte in Deutschland.

Das Stoma ideal zu versorgen und dem Stomaträger einen selbstbestimmten Alltag unter Erhalt einer hohen Lebensqualität zu ermöglichen ist das Ziel unserer Produkte und unserer tagtäglichen Arbeit.

Ihr Team der FORLIFE



Hydrokolloid

Der hydrokolloide Hautschutz der STOMOCUR® Produkte besteht ausschließlich aus den natürlichen Stoffen Pektin, Gelatine und Zellulose.

Er wird in gleichmäßiger Dicke oder konturiert angeboten. Das hydrokolloide Hautschutzmaterial ist hier innen, direkt am Stoma, dicker.

Nach außen wird der Hautschutz dünner. Alle konvexen STOMOCUR® Versorgungsen sind prinzipiell mit konturiertem Hautschutz ausgestattet. Das bedeutet einen sehr schnellen und sicheren Halt aufgrund der hohen Absorptionskapazität innen.

Wie funktioniert Hydrokolloid?

Der hydrokolloide Hautschutz haftet durch Wärme und Feuchtigkeitsaufnahme an der Haut. Die Flüssigkeitsaufnahme führt zum leichten Aufquellen und somit zur sehr guten Anpassung an das Stoma. Undichtigkeiten und Hautirritationen werden so verhindert.

Produktvorteile

- » Nachhaltiger Schutz der stomaumgebenden Haut
- » Hohe Hautverträglichkeit
- » Gute Handhabbarkeit
- » Bietet konturiert noch mehr Flexibilität und Komfort



Alginat

Alginat kommen in der Natur sehr häufig vor. Sie wurden bereits in den 1980er Jahren als Verbandmaterial für Spalthautentnahmestellen verwendet. Für die Herstellung kommerzieller Alginat werden ausschließlich Braunalgen (Meeresalgen) verwendet.



Wie funktioniert Alginat?


Alginat können bis zum 20-fachen ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Diese Flüssigkeit wird dabei in die Hohlräume der Platte eingelagert. Durch die enorme Flüssigkeitsaufnahme des Alginats bleibt die Haut nur leicht feucht.

Produktvorteile

- » Bei akuter Versorgung von parastomalen Hautproblemen sind keine zusätzlichen Hilfsmittel (hydrokolloide Hautschutzplatten, Alginatkompressen, Pasten, usw.) notwendig.
- » Kosteneinsparung
- » Einfachere Handhabung als mit weiteren Hilfsmitteln
- » Der Betroffene kann sich weiter selbst versorgen

Konvexe Versorgung

STOMOCUR® bietet hier insgesamt vier verschiedene Konvexitäten in zwei unterschiedlichen Tiefen an. Unterschiede in der Breite und der Tiefe des eingearbeiteten Kegels erlauben eine optimale Anpassung an die körperlichen Gegebenheiten.

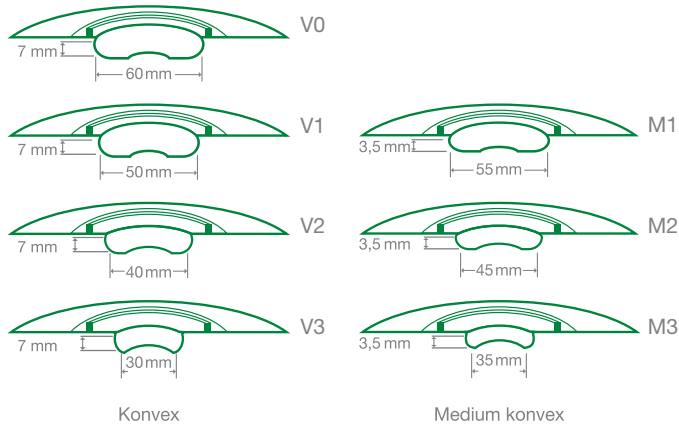

Farbcode für das Rastringssystem

Die Basisplatten und die 2-teiligen Beutel von STOMOCUR® sind zur besseren Zuordnung in ein Farbsystem zusammengefasst.

45
57
70
85 = Rastring Ø in mm

Inhalt

Einteilige Versorgung	9
Kolostomieversorgung.....	9
Ileostomieversorgung	13
Urostomieversorgung	16
Microskin	21
Drainageversorgung	24
Zweiteilige Versorgung	26
Basisplatten.....	26
Beutel für Basisplatten	28
Zubehör	31



Kolostomie Select large	Kolostomie Select	Kolostomie Select small	Kolostomie Select gelatinefrei
----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung	"Window"	"Window"	"Window"	"Window"
Hafffläche	135 x 135 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm
Beutelgröße	160 x 220 mm	145 x 205 mm	130 x 190 mm	145 x 205 mm
Volumen	470 ml	380 ml	250 ml	380 ml
VE	30	30	30	30
Ausschneidbar	bis 90 mm	bis 60 mm	bis 60 mm	bis 60 mm
Art.-Nr.	20 mm CSL3020CW	CS3020CW	CSH20S	CSG20
PZN	10312485	03811791	12726268	17565545
Art.-Nr.	25 mm CSL3025CW	CS3025CW	CSH25S	
PZN	10557927	03811839	12726251	
Art.-Nr.	30 mm CSL3030CW	CS3030CW	CSH30S	
PZN	10557910	03811845	12726239	
Art.-Nr.	35 mm CSL3035CW	CS3035CW	CSH35S	
PZN	10557904	03811851	12726222	
Art.-Nr.	40 mm CSL3040CW	CS3040CW	CSH40S	
PZN	10557896	03811868	12726245	
Art.-Nr.	45 mm CSL3045CW	CS3045CW	CSH45S	
PZN	10557873	03811874	14045408	
Art.-Nr.	50 mm CSL3050CW	CS3050CW	CSH50S	
PZN	10557867	03811897	14045383	
Art.-Nr.	55 mm CSL3055CW	CS3055CW		
PZN	10557850	03811911		
Art.-Nr.	60 mm CSL3060CW	CS3060CW		
PZN	10557844	09897440		

Kolostomie
Select konvex



Kolostomie
Select medium konvex



Hautschutz	Hydrokolloid		Hydrokolloid	
Ausführung	"Window"		"Window"	
Hafffläche	118 x 118 mm		118 x 118 mm	
Beutelgröße	145 x 205 mm		145 x 205 mm	
Volumen	380 ml		380 ml	
VE	20		20	
Ausschneidbar	V0: bis 57 mm V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm		M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm	
Art.-Nr.	V0 20 mm	CSK20CWV0		
PZN		13862128		
Art.-Nr.	V1 20 mm	CSK20CWV1	M1 20 mm	CSKM20CWV1
PZN		09240131		11549232
Art.-Nr.	V1 25 mm	CSK25CWV1	M1 25 mm	CSKM25CWV1
PZN		09899692		17617354
Art.-Nr.	V1 30 mm	CSK30CW V1	M1 30 mm	CSKM30CWV1
PZN		09899700		17551017
Art.-Nr.	V1 35 mm	CSK35CW V1	M1 35 mm	CSKM35CWV1
PZN		09899717		17551023
Art.-Nr.	V1 40 mm	CSK40CW V1	M1 40 mm	CSKM40CWV1
PZN		10521444		17551046
Art.-Nr.	V2 20 mm	CSK20CWV2	M2 15 mm	CSKM15CWV2
PZN		09240148		12644139
Art.-Nr.	V2 25 mm	CSK25CWV2	M2 20 mm	CSKM20CWV2
PZN		09899723		17617360
Art.-Nr.	V2 30 mm	CSK30CWV2	M2 25 mm	CSKM25CWV2
PZN		10521450		17551075
Art.-Nr.	V3 20 mm	CSK20CWV3	M3 10 mm	CSKM10CWV3
PZN		09240154		12644122

Kolostomie
Select Alginat



Kolostomie
Select Alginat
small



Kolostomie
Select Alginat
konvex



Hautschutz	Alginat		Alginat		Alginat	
Ausführung	"Window"		"Window"		"Window"	
Hafffläche	110 x 110 mm		110 x 110 mm		118 x 118 mm	
Beutelgröße	145 x 205 mm		130 x 190 mm		145 x 205 mm	
Volumen	380 ml		250 ml		380 ml	
VE	30		30		20	
Ausschneidbar	bis 60 mm		bis 60 mm		V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	
Art.-Nr.	20 mm	CS3020CWA	CSA20S	V1 20 mm	CSK20CWAV1	
PZN		03386879	14061583		11549290	
Art.-Nr.	25 mm	CS3025CWA	CSA25S	V1 25 mm	CSK25CWAV1	
PZN		09927253	14061614		10557809	
Art.-Nr.	30 mm	CS3030CWA	CSA30S	V1 30 mm	CSK30CWAV1	
PZN		10521415	14061620		10557784	
Art.-Nr.	35 mm	CS3035CWA	CSA35S	V1 35 mm	CSK35CWAV1	
PZN		10521421	14061643		10557790	
Art.-Nr.	40 mm	CS3040CWA	CSA40S	V1 40 mm	CSK40CWAV1	
PZN		10521438	14061666		10557755	
Art.-Nr.	45 mm		CSA45S	V2 20 mm	CSK20CWAV2	
PZN			14061637		11549309	
Art.-Nr.	50 mm		CSA50S	V2 25 mm	CSK25CWAV2	
PZN			14061672		11549315	
Art.-Nr.	60 mm			V2 30 mm	CSK30CWAV2	
PZN					14061821	
Art.-Nr.				V3 20 mm	CSK20CWAV3	
PZN					11549344	



Ileostomie Protect	Ileostomie Protect	Ileostomie Protect small	Ileostomie Protect gelatinefrei
--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung	"Window"	Transparent	"Window"	"Window"
Hafffläche	110 x 110 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm
Beutelgröße	150 x 220 mm	150 x 220 mm	150 x 190 mm	150 x 220 mm
Volumen	530 ml	530 ml	400 ml	530 ml
VE	30	30	30	30
Ausschneidbar	bis 60 mm	bis 60 mm	bis 60 mm	bis 60 mm
Art.-Nr.	15 mm IPH15	IPH15T	IPH15S	IPG20
PZN	14419978	16134174	17551336	17565551
Art.-Nr.	20 mm IPH20		IPH20S	
PZN	14330362		17551282	
Art.-Nr.	25 mm IPH25		IPH25S	
PZN	14330379		17551299	
Art.-Nr.	30 mm IPH30		IPH30S	
PZN	14330385		17551307	
Art.-Nr.	35 mm IPH35		IPH35S	
PZN	14330416		17551313	
Art.-Nr.	40 mm IPH40		IPH40S	
PZN	14330422		17551276	
Art.-Nr.	45 mm IPH45			
PZN	14330439			
Art.-Nr.	50 mm IPH50			
PZN	14330451			
Art.-Nr.	55 mm IPH55			
PZN	16128707			
Art.-Nr.	60 mm IPH60			
PZN	16128713			

Ileostomie
 Protect konvex

Ileostomie
 Protect medium
 konvex

Ileostomie
 Protect medium
 konvex


Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung	"Window"	"Window"	Transparent
Hafffläche	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße	150 x 220 mm	150 x 220 mm	150 x 220 mm
Volumen	530 ml	530 ml	530 ml
VE	10	10	10
Aus- schneidbar	V0: bis 57 mm V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm	M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm
Art.-Nr.	V0 20 mm	IPH20V0	
PZN	14334710		
Art.-Nr.	V1 20 mm	IPH20V1	M1 20 mm
PZN	14334644	14360239	17551371
Art.-Nr.	V1 25 mm	IPH25V1	M1 25 mm
PZN	14334650	17617377	17617414
Art.-Nr.	V1 30 mm	IPH30V1	M1 30 mm
PZN	14334667	17558350	17551388
Art.-Nr.	V1 35 mm	IPH35V1	M1 35 mm
PZN	14334673	17558373	17551394
Art.-Nr.	V1 40 mm	IPH40V1	M1 40 mm
PZN	14334704	17558404	17551402
Art.-Nr.	V2 20 mm	IPH20V2	M2 15 mm
PZN	14360185	14360245	17551419
Art.-Nr.	V2 25 mm	IPH25V2	M2 20 mm
PZN	14360191	17617408	17617443
Art.-Nr.	V2 30 mm	IPH30V2	M2 25 mm
PZN	14360216	17558410	17584057
Art.-Nr.	V3 20 mm	IPH20V3	M3 10 mm
PZN	14360222	14360274	17551431

Ileostomie
 Protect Alginat

Ileostomie
 Protect Alginat konvex


Hautschutz	Alginat	Alginat
Ausführung	"Window"	"Window"
Hafffläche	110 x 110 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße	150 x 220 mm	150 x 220 mm
Volumen	530 ml	530 ml
VE	30	10
Aus- schneidbar	bis 60 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm
Art.-Nr.	15 mm	IPA15
PZN	14419990	
Art.-Nr.	20 mm	IPA20
PZN	14363491	V1 20 mm
Art.-Nr.	25 mm	IPA25
PZN	14363516	V1 25 mm
Art.-Nr.	30 mm	IPA30
PZN	14363522	V1 30 mm
Art.-Nr.	35 mm	IPA35
PZN	14363539	V1 35 mm
Art.-Nr.	40 mm	IPA40
PZN	14363640	V2 20 mm
Art.-Nr.	45 mm	IPA45
PZN	16128742	V2 25 mm
Art.-Nr.	50 mm	IPA50
PZN	16128759	V3 20 mm
Art.-Nr.	55 mm	IPA55
PZN	16128765	
Art.-Nr.	60 mm	IPA60
PZN	16128771	

Urostomie Safe	Urostomie Safe	Urostomie Safe	Urostomie Safe
----------------	----------------	----------------	----------------



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung	"Window" Softauslass	Transparent Softauslass	"Window" Drehverschluss	Transparent Drehverschluss
Hafffläche	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße	130 x 195 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen	420 ml	420 ml	420 ml	420 ml
VE	30	30	30	30
Ausschneidbar	bis 60 mm	bis 60 mm	bis 60 mm	bis 60 mm
Art.-Nr.	15 mm USH15F	USH15FT	USH15H	USH15HT
PZN	17160535	17160529	17552809	17552850
Art.-Nr.	20 mm USH20F		USH20H	
PZN	17160541		17552815	
Art.-Nr.	25 mm USH25F		USH25H	
PZN	17160558		17552821	
Art.-Nr.	30 mm USH30F		USH30H	
PZN	17160564		17552838	

Urostomie Safe gelatinefrei

Hautschutz	Hydrokolloid
Ausführung	"Window" Softauslass
Hafffläche	118 x 118 mm
Beutelgröße	130 x 195 mm
Volumen	420 ml
VE	30
Ausschneidbar	bis 60 mm
Art.-Nr.	M1 20 mm USG15FT
PZN	17255980

Urostomie Safe konvex	Urostomie Safe konvex	Urostomie Safe konvex	Urostomie Safe konvex
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung	"Window", Softauslass	Transparent Softauslass	"Window" Drehverschluss	Transparent Drehverschluss
Hafffläche	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße	130 x 195 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen	420 ml	420 ml	420 ml	420 ml
VE	10	10	10	10
Aus- schneidbar	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm
Art.-Nr.	V1 10 mm USH10V1F	USH10V1FT	USH10V1H	USH10V1HT
PZN	13866793	16622465	17552867	17552927
Art.-Nr.	V1 30 mm USH30V1F	USH30V1FT	USH30V1H	USH30V1HT
PZN	13866942	16622519	17552873	17552933
Art.-Nr.	V1 35 mm USH35V1F	USH35V1FT	USH35V1H	USH35V1HT
PZN	13866965	16622525	17552896	17552956
Art.-Nr.	V2 10 mm USH10V2F	USH10V2FT	USH10V2H	USH10V2HT
PZN	13866801	16622376	17552904	17552962
Art.-Nr.	V2 25 mm USH25V2F	USH25V2FT	USH25V2H	USH25V2HT
PZN	13866936	16622407	17552910	17552979
Art.-Nr.	V3 10 mm USH10V3F	USH10V3FT	USH10V3H	USH10V3HT
PZN	13866818	16622554	17552991	17553045
Art.-Nr.	V3 15 mm USH15V3F	USH15V3FT	USH15V3H	USH15V3HT
PZN	13866847	16622560	17553016	17553051
Art.-Nr.	V3 20 mm USH20V3F	USH20V3FT	USH20V3H	USH20V3HT
PZN	13866899	16622577	17553022	17553068

Urostomie
 Safe medium konvex

Urostomie
 Safe medium konvex


		Hydrokolloid	Hydrokolloid
Hautschutz		Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung		"Window" Softauslass	Transparent Softauslass
Hafffläche		118 x 118 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße		130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen		420 ml	420 ml
VE		10	10
Ausschneidbar		M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm	M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm
Art.-Nr.	M1 20 mm	USH20M1F	USH20M1FT
PZN		13866988	16622436
Art.-Nr.	M1 25 mm	USH25M1F	USH25M1FT
PZN		17617466	17617489
Art.-Nr.	M1 30 mm	USH30M1F	USH30M1FT
PZN		17557770	17557729
Art.-Nr.	M1 35 mm	USH35M1F	USH35M1FT
PZN		17557787	17557735
Art.-Nr.	M1 40 mm	USH40M1F	USH40M1FT
PZN		17557793	17557741
Art.-Nr.	M2 15 mm	USH15M2F	USH15M2FT
PZN		13866994	16622442
Art.-Nr.	M2 20 mm	USH20M2F	USH20M2FT
PZN		17622355	17617472
Art.-Nr.	M2 25 mm	USH25M2F	USH25M2FT
PZN		17557824	17557758
Art.-Nr.	M3 10 mm	USH10M3F	USH10M3FT
PZN		13867002	16622459

Urostomie
 Safe medium konvex

Urostomie
 Safe medium konvex


		Hydrokolloid	Hydrokolloid
Hautschutz		Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung		"Window" Drehverschluss	Transparent Drehverschluss
Hafffläche		118 x 118 mm	118 x 118 mm
Beutelgröße		130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen		420 ml	420 ml
VE		10	10
Ausschneidbar		M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm	M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm
Art.-Nr.	M1 20 mm	USH20M1H	USH20M1HT
PZN		17557899	17557830
Art.-Nr.	M1 25 mm	USH25M1H	USH25M1HT
PZN		17757173	17757204
Art.-Nr.	M1 30 mm	USH30M1H	USH30M1HT
PZN		17557907	17557847
Art.-Nr.	M1 35 mm	USH35M1H	USH35M1HT
PZN		17557913	17557853
Art.-Nr.	M1 40 mm	USH40M1H	USH40M1HT
PZN		17557936	17557876
Art.-Nr.	M2 15 mm	USH15M2H	USH15M2HT
PZN		17557942	17557882
Art.-Nr.	M2 20 mm	USH20M2H	USH20M2HT
PZN		17757196	17757210
Art.-Nr.	M2 25 mm	USH25M2H	USH25M2HT
PZN		17557971	17557959
Art.-Nr.	M3 10 mm	USH10M3H	USH10M3HT
PZN		17557988	17557965



Microskin

Microskin-Produkte sind mit einer besonders dünnen, elastischen und atmungsaktiven Hautschutzfolie versehen. Alle Microskin-Produkte sind mit und ohne integrierten hydrokolloiden Hautschutzring erhältlich. Für Stomaträger mit permanenter flüssiger Ausscheidung empfiehlt sich ein Produkt mit integriertem Hautschutzring, um die Dichtigkeit der Versorgung zu gewährleisten.



Wie funktioniert Microskin?

Die Hautschutzfolie schmiegt sich an die Haut an und bietet durch sichere Haftung und Flexibilität besondere Bewegungsfreiheit. Die Folie ist wasserdampfdurchlässig, lässt jedoch kein Wasser eindringen.

Produktvorteile

- » Besonders geeignet bei Hautfalten, Stomaanlagen nahe an Knochenvorsprüngen und narbigen Hautpartien
- » Hoher Tragekomfort, elastisch, flexibel, diskret (Bewegungsfreiheit bei Sport und im Alltag)
- » Schonende Haftung
- » Wasserdampfdurchlässigkeit, kein Schwitzen
- » Besonders für die Kinderversorgung und zum Baden geeignet
- » Leichtes Ablösen und rückstandsfreie Entfernung
- » Mit und ohne hydrokolloiden Hautschutzring erhältlich

Kolostomie Select Microskin	Ileostomie Protect Microskin	Urostomie Safe Microskin	Urostomie Safe Microskin
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Hautschutz	Microskin	Microskin	Microskin	Microskin
Ausführung	"Window"	"Window"	"Window" Softauslass	"Window" Drehverschluss
Haftfläche	135 x 100 mm	135 x 100 mm	135 x 100 mm	135 x 100 mm
Beutelgröße	145 x 205 mm	150 x 220 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen	380 ml	530 ml	420 ml	420 ml
VE	30	30	30	30
Ausschneidbar	bis 50 mm	bis 50 mm	bis 50 mm	bis 50 mm
Art.-Nr.	13 mm CS2513CW	IPM13	USM13F	USM13H
PZN	10525175	14375198	17160386	17846770
Art.-Nr.	20 mm		USM20F	USM20H
PZN			17160392	17846793
Art.-Nr.	25 mm		USM25F	USM25H
PZN			17160400	17846801
Art.-Nr.	30 mm		USM30F	USM30H
PZN			17160417	17846818
Transparent				
Art.-Nr.	13 mm		USM13FT	USM13HT
PZN			17206504	17846787

Kolostomie Select Microskin mit Hautschutzring	Ileostomie Protect Microskin mit Hautschutzring	Urostomie Safe Microskin mit Hautschutzring	Urostomie Safe Microskin mit Hautschutzring
--	---	---	---



Hautschutz	Microskin / Hydrokolloid	Microskin / Hydrokolloid	Microskin / Hydrokolloid	Microskin / Hydrokolloid
Ausführung	"Window"	"Window"	"Window" Softauslass	"Window" Drehverschluss
Haftfläche	135 x 100 mm	135 x 100 mm	135 x 100 mm	135 x 100 mm
Beutelgröße	145 x 205 mm	150 x 220 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm
Volumen	380 ml	530 ml	420 ml	420 ml
VE	30	30	30	30
Ausschneidbar	bis 50 mm	bis 50 mm	bis 50 mm	bis 50 mm
Art.-Nr.	10 mm		USMH10F	USMH10H
PZN			17160423	17846712
Art.-Nr.	15 mm	CS2615CW	IPMH15	USMH15F
PZN		10525146	14375241	17160446
Art.-Nr.	20 mm			USMH20F
PZN				17160481
Art.-Nr.	25 mm			USMH25F
PZN				17160498
Art.-Nr.	30 mm			USMH30F
PZN				17160512
Transparent				
Art.-Nr.	10 mm			USMH10FT
PZN				17206496
				17846764

Urostomie Safe Microskin mit Hautschuttring small	Urostomie Safe Microskin mit Hautschuttring small
--	--



Hautschutz	Microskin	Microskin
Ausführung	"Window" Softauslass	"Window" Drehverschluss
Haftfläche	135 x 100 mm	135 x 100 mm
Beutelgröße	70 x 165 mm	70 x 165 mm
Volumen	100 ml	100 ml
VE	30	30
Ausschneidbar	bis 50 mm	bis 50 mm
Art.-Nr.	10 mm USMH10SF	USMH10SH
PZN	17160475	17852428
Transparent		
Art.-Nr.	USMH10SFT	
PZN	17206473	

Drainagebeutel extra	Drainagebeutel extra mit "Access Port"
--------------------------------	---



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Körperabgewandt	Transparent	Transparent
VE	1	1
Art.-Nr.	90 x 180 mm SDE2-XS	SDE2-XSA
PZN	11549195	11549203
Art.-Nr.	240 x 155 mm SDE2-S	SDE2-SA
PZN	11549166	11549172
Art.-Nr.	60 x 190 mm	SDE2-XMA
PZN		11549189
Art.-Nr.	85 x 250 mm SDE2-M	SDE2-MA
PZN	11549137	11549143
Art.-Nr.	160 x 200 mm SDE2-L	SDE2-LA
PZN	11549114	11549108
Art.-Nr.	230 x 380 mm SDE2-XXL	SDE2-XXLA
PZN	11549226	11549120


*Abbildung beispielhaft SDE2-L bzw. SDE2-LA

Drainagebeutel Protect plan	Drainagebeutel Protect konvex	Drainagebeutel Protect medium konvex	Drainagebeutel
--------------------------------	----------------------------------	--	----------------



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid	Hydrokolloid
Körperabgewandt	"Window"	"Window"	"Window"	Transparent
Hafffläche mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm	118 x 118 mm	
Beutelgröße mm	150 x 220 mm	150 x 220 mm	150 x 220 mm	
Füllvolumen	540 ml	540 ml	540 ml	50 - 300 ml
VE	10	10	10	30
Ausschneidbar	bis 60 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	M1: bis 47 mm M2: bis 40 mm M3: bis 28 mm	
Art.-Nr.	DP5020	DP15V1	DP20M1	DH3S
PZN	12465129	12465158	17550526	12726972
Art.-Nr.		DP15V2	DP15M2	DH5
PZN		12465141	17550532	12726995
Art.-Nr.		DP15V3	DP10M3	DH5L
PZN		12465135	17550549	12726989

Clic Basisplatte	Clic Basisplatte konturiert
---------------------	--------------------------------

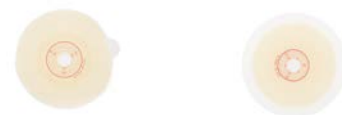

45 57 70 85

Rastring Ø in mm

Hautschutz		Hydrokolloid	Hydrokolloid
Ausführung		plan	plan
Hafffläche		105 x 110 mm	118 x 118 mm
VE		5	5
Ausschneidbar		RR45: bis 35 mm RR57: bis 40 mm RR70: bis 50 mm	RR45: bis 35 mm RR57: bis 40 mm RR70: bis 50 mm RR85: bis 65 mm
Art.-Nr.	15 mm	● CFL4515	● UFL4515
PZN		03368479	06885577
Art.-Nr.	20 mm	● CFL4520	● UFL4520
PZN		03368597	09912671
Art.-Nr.	25 mm	● CFL4525	● UFL4525
PZN		03368605	09912688
Art.-Nr.	30 mm	● CFL4530	● UFL4530
PZN		03369792	09912694
Art.-Nr.	15 mm	● CFL5715	● UFL5715
PZN		03030378	06885583
Art.-Nr.	35 mm	● CFL5735	● UFL5735
PZN		03030444	12733038
Art.-Nr.	40 mm	● CFL5740	● UFL5740
PZN		03030450	12733133
Art.-Nr.	15 mm	● CFL7015	● UFL7015
PZN		03030533	06885608
Art.-Nr.	45 mm	● CFL7045	● UFL7045
PZN		07640168	10631463
Art.-Nr.	50 mm	● CFL7050	● UFL7050
PZN		07640352	14050970
Art.-Nr.	15 mm		● XUFL8515
PZN			04543795

Clic	Clic
Basisplatte konvex	Basisplatte konturiert konvex

45 57 70 85

Rastring Ø in mm



Hautschutz	Hydrokolloid	Hydrokolloid	
Ausführung	konvex	konvex	
Haftfläche	118 x 118 mm	118 x 118 mm	
VE	3	3	
Ausschneidbar	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	V1: bis 43 mm V2: bis 35 mm V3: bis 25 mm	
Art.-Nr.	V2 15 mm	● XCFK4515V2	● CFK4515V2
PZN		06716573	01739747
Art.-Nr.	V2 20 mm	● XCFK4520V2	● CFK4520V2
PZN		09926271	01739724
Art.-Nr.	V2 25 mm	● XCFK4525V2	● CFK4525V2
PZN		06716627	01739687
Art.-Nr.	V2 30 mm	● XCFK4530V2	● CFK4530V2
PZN		06716656	01739517
Art.-Nr.	V3 15 mm	● XCFK4515V3	● CFK4515V3
PZN		01126536	01743068
Art.-Nr.	V1 15 mm	● XCFK5715V1	● CFK5715V1
PZN		13986758	13986824
Art.-Nr.	V1 25 mm	● XCFK5725V1	● CFK5725V1
PZN		13986793	13986876
Art.-Nr.	V1 30 mm	● XCFK5730V1	● CFK5730V1
PZN		13986801	13987019
Art.-Nr.	V1 35 mm	● XCFK5735V1	● CFK5735V1
PZN		13986818	13987025
Art.-Nr.	V2 15 mm	● XCFK5715V2	● CFK5715V2
PZN		06717058	01744671
Art.-Nr.	V3 15 mm	● XCFK5715V3	● CFK5715V3
PZN		00101037	06706037

Clic	Clic	Clic	Clic
Kolostomiebeutel	Ileostomiebeutel	Ileostomiebeutel small	Urostomiebeutel

45 57 70 85

Rastring Ø in mm



Ausführung	"Window"	"Window"	"Window"	"Window" Softauslass	
Beutelgröße	145 x 205 mm	150 x 220 mm	150 x 190 mm	130 x 195 mm	
Volumen	380 ml	530 ml	400 ml	420 ml	
VE	30	30	30	30	
Art.-Nr.	RR 45	● CD4545C	● CI45	● CI45S	● CU45F
PZN		04927001	14367336	16082980	17206869
Art.-Nr.	RR 57	● CD5757C	● CI57		● CU57F
PZN		02480464	14367365		17206875
Art.-Nr.	RR70	● CD7070C	● CI70		
PZN		01594007	16082974		
Art.-Nr.	RR 85		● XIPF8585C		
PZN			04633340		

Clic Urostomiebeutel	Clic Urostomiebeutel	Clic Urostomiebeutel	Clic Drainage Protect
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



45 57 70 85

Rastring Ø in mm

Ausführung	Transparent Softauslass	"Window" Drehverschluss	Transparent Drehverschluss	Transparent
Beutelgröße	130 x 195 mm	130 x 195 mm	130 x 195 mm	150 x 220 mm
Volumen	420 ml	420 ml	420 ml	540 ml
VE	30	30	30	30
Art.-Nr.	RR 45 ● CU45FT	● CU45H	● CU45HT	
PZN	17206823	17554866	17554889	
Art.-Nr.	RR 57 ● CU57FT	● CU57H	● CU57HT	
PZN	17206852	17554872	17554895	
Art.-Nr.	RR70			● CDP70T
PZN				17550555



Zweitellige Versorgung

Hautschutzplatten



Hautschutzringe



Material	Hydrokolloid		Hydrokolloid	
VE	5 / CT2196H = 1		30	
	Größe		Öffnung	Außendurchmesser 48 bzw. 63 mm
Art.-Nr.	10 x 10 cm	CT101006	10 mm	48101
PZN		10627941		15865421
Art.-Nr.	15 x 15 cm	CT151506	15 mm	48151
PZN		1874037		15865438
Art.-Nr.	20 x 20 cm	CT202006	20 mm	48201
PZN		10627935		15865444
Art.-Nr.	37 x 22 cm	CT372206	25 mm	63251
PZN		04877390		15865450
Art.-Nr.	22 x 22 cm	CT2196H	30 mm	63301
PZN		01696073		15865467
Art.-Nr.			35 mm	63351
PZN				15865473
Art.-Nr.			40 mm	63401
PZN				15865504

Fixierstreifen



Hautschutzpaste mit Alkohol



Hautschutzpaste ohne Alkohol



Artr.-Nr.	FS20	CP2050	PASTE0A
Inhalt	20 Stück	56 g	56 g
PZN	16622583	07269751	14055921

Hautschutzpuder



Safety Hauptpflege-Lotion 50 ml



Safety Hauptpflege-Lotion 100 ml



Artr.-Nr.	HP30	SSafety50	SSafety100
Inhalt	30 g	50 ml	100 ml
PZN	04572710	04751766	04751772

EmplaSectal



Stomagürtel 100 cm / 120 cm



SGX30



Artr.-Nr.	EmplaSectal	AB01 / AB02	SGX30
Inhalt	50 ml	1 Stück	30 Stück
PZN	00200420	06941287 / 10525117	17511897



Für Ihre Notizen

Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner:



For Life

Produktions- und Vertriebsgesellschaft

für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16

12489 Berlin

Germany

mail@forlife.info

www.forlife.info

Hotline: 0800-78 666 287 (gebührenfrei)



www.facebook.com/forlifeberlin/

